



KiilTO

KIILTOS SORTIMENT FÖR

DESINFEKTION AV MEDICINTEKNISK UTRUSTNING

plum KiilTO PRO

DE BÄSTA LÖSNINGARNA FÖR HÄLSO- & SJUKVÅRDEN

På Kiilto samarbetar vi med professionen för att skapa trygga miljöer. Lokalt samarbete med vården och vår nordiska utvecklings- och innovationsavdelning är grunden till våra hållbara lösningar, anpassade för den lokala marknadens behov.

Kiilto erbjuder hygienlösningar som skapar välbefinnande och säkerhet på både företag och inom vården. Sortimentet består av ett brett utbud av noga testade, högkvalitativa produkter och tjänster med bevisad effekt. Miljöansvar vägleder oss i att skapa nya sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och upprätthålla patientsäkerheten.

Som branschledare är vi stolta över att kunna erbjuda vårt omfattande sortiment för hälso- och sjukvården, baserat på årtionden av erfarenhet.

Desinfektion av medicinteknisk utrustning – **CE bygger trygghet, tillit och säkerhet**

Per definition är en medicinteknisk produkt varje artikel som är avsedd att användas för medicinska ändamål, exklusive läkemedel eller andra artiklar med farmaceutiskt, immunologiskt eller metaboliskt arbetssätt.


CE-märkning krävs för medicintekniska produkter som används inom hälso- och sjukvården. EU-förordningen om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) är också tydlig med att även desinfektion av all medicinteknisk utrustning ska ske med CE-märkta desinfektionsmedel.

Den senaste förordningen syftar till att säkerställa säkerheten och kvalitén för medicintekniska produkter, inklusive produkter som utvecklats för rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter.

Kiilto tillhandahåller CE-märkta, väl testade och lättanvända desinfektionsmedel, utvecklade speciellt för desinfektion av medicintekniska produkter.

Vilka ytor är klassificerade som medicinteknisk utrustning?

De mest uppenbara medicintekniska produkterna, som namnet antyder, är apparater som används inom sjukvården som övervakningsutrustning eller instrument som t.ex. ett stetoskop eller en spruta. Vad många inte vet, är dock att även patientsängar, sängbord och rullstolar klassas som medicinteknisk utrustning och därför måste desinficeras med CE-märkta desinfektionsprodukter för att man ska leva upp till den Medicintekniska förordningen.

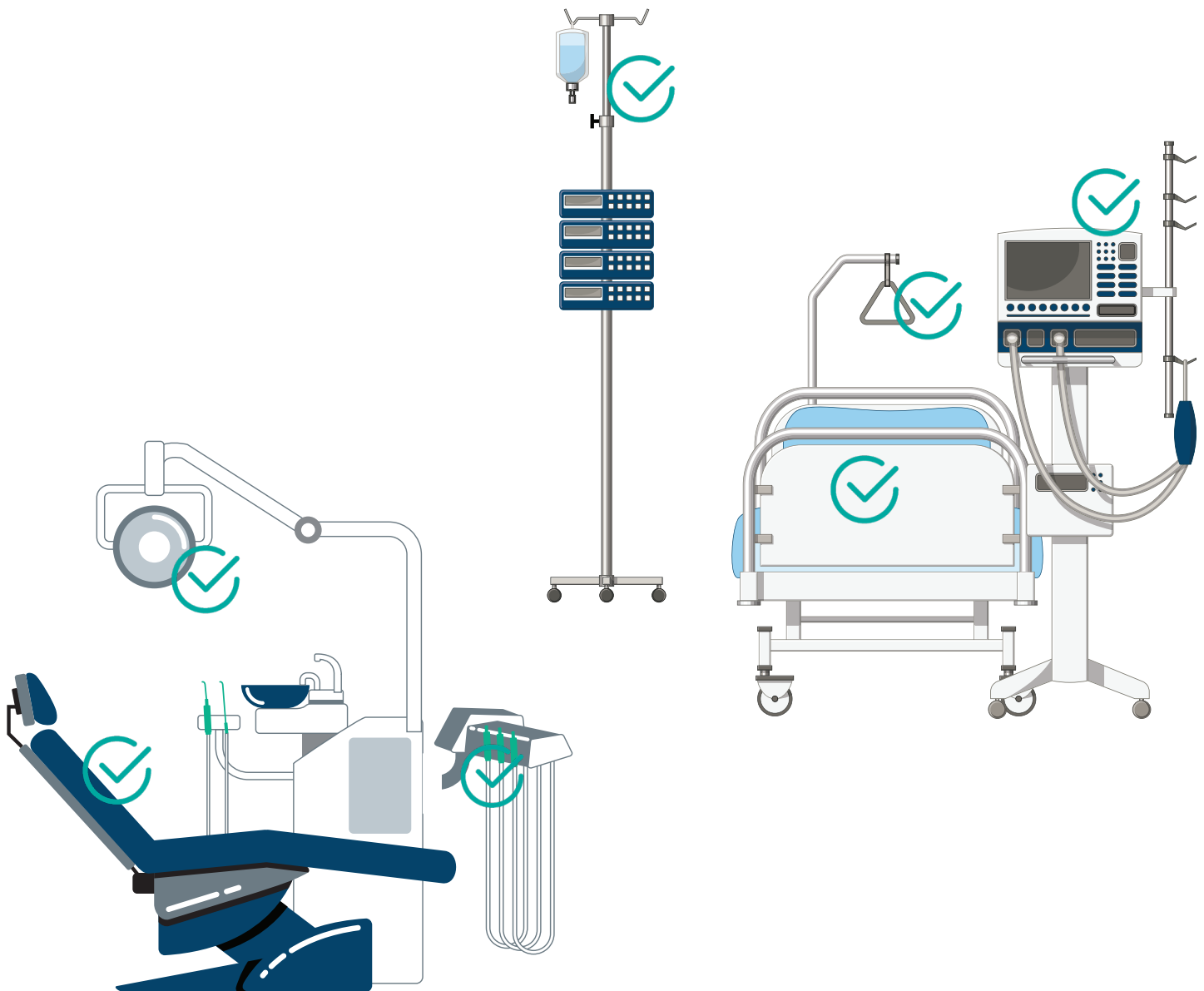

Varför CE-märkt desinfektion?

- ✓ Tydliga direktiv i EUs förordning för medicintekniska produkter (MDR) att medicinteknisk utrustning ska desinficeras med CE-märkta desinfektionsmedel
- ✓ Mycket väl testade avseende effektivitet, säkerhet, prestanda och stabilitet
- ✓ Granskad och certifierad av ett externt anmält organ
- ✓ Spårbarhet genom hela leveranskedjan
- ✓ Uppföljningsstudier för att säkerställa korrekt användning

CE-märkt ytdesinfektion för medicinteknisk utrustning & ytor



4 olika riskklasser

Alla medicintekniska produkter är indelade i olika klasser beroende på risk och avsedd användning. Det finns fyra olika riskklasser från klass I med lägst risk där vi kan hitta t.ex. ögonskölj, handskar och instrumentrengöringsprodukter till klass III med högst risk där medicintekniska produkter som tex. pacemakers finns.

Produkterna i klass IIa är för non-invasiv användning (penetrerar inte huden). Här hittar vi t.ex. desinfektionsprodukter avsedda för desinfektion av medicintekniska produkter såsom stetoskop, övervakningsutrustning, för bukundersökning samt patientsängar och dentala unitar.

Klass IIb är produkter för invasiv användning (penetrerar huden eller slemhinnan). Här hittar vi bl.a. desinfektionsmedel för flexibla endoskop.

Klass III

Högriskprodukter;
behöver godkännas
av ett anmält organ.



Klass IIb

Produkter för invasiv användning;
behöver godkännas av ett
anmält organ.



Klass IIa

Produkter för icke-invasiv användning;
behöver godkännas av ett anmält organ.



Klass I

Underkategorier: Is, Im, Irsi

Lågriskprodukter;
behöver normalt ej godkännas av ett anmält organ
(undantaget klass Is där steriliseringsdelen behöver
utvärderas)



Alkoholbaserad CE-märkt desinfektion



KIILTO PRO MD DES IPA 45+

Ytdesinfektion med rengörande effekt
1 l (x12) • 668-12 | 5 l (x3) • 669-3

Bruksfärdig IPA-baserad (45 vol%) desinfektion med rengörande verkan (tensid). För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Även klassificerad som biocid, PT2, lämplig för allmänna ytor. Snabbverkande, bra upplösande effekt på i vården vanligt förekommande smuts t.ex. blod.

*CE-märkt medicinteknisk produkt,
klass IIa (NB 0537)*

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	30 sek
EN 13624 (yeastocidal)	30 sek
EN 14476 (höljebärande virus)	30 sek
EN 14348 (mykobactericidal)	5 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	1 min
EN 13697 (bactericidal / yeastocidal)	1 min / 1 min



KIILTO PRO MD INSTRU DES 45+

Instrumentdesinfektion
1 l (x12) • 670-12 | 3 l (x3) • 671-3

Bruksfärdig IPA-baserad (45 vol%) instrumentdesinfektion med rengörande verkan (tensid). För non-invasiv medicinteknisk utrustning eller instrumentblötläggning. Används på ytor som tål alkohol. För invasiv medicinteknisk utrustning rekommenderas produkten enbart som fördesinfektion innan steriliseringsprocessen. Snabbverkande, innehåller korrosionsinhibitor som förhindrar rost.

*CE-märkt medicinteknisk produkt,
klass IIa (NB 0537)*

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	1 min
EN 13624 (yeastocidal)	2 min
EN 14476 (höljebärande virus)	30 sek
EN 14348 (mykobactericidal)	5 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	1 min
EN 14561 (bactericidal - instrumentblötläggning)	15 min
EN 14562 (yeastocidal / instrumentblötläggning)	15 min
EN 14563 (mykobactericidal / instrumentblötläggning)	15 min
EN 17111 (höljebärande virus - instrumentblötläggning)	15 min



KIILTO PRO MD DES ETANOL 75+

Ytdesinfektion med rengörande effekt
1 l (x12) • 695-12

Bruksfärdig etanolbaserad (75 vol%) desinfektion med rengörande verkan (tensid). För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Även klassificerad som biocid, PT2, lämplig för allmänna ytor. Snabbverkande med bra effekt på virus.

*CE-märkt medicinteknisk produkt,
klass IIa (NB 0537)*

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	30 sek
EN 13624 (yeastocidal)	30 sek
EN 14476 (Adenovirus, Murin Norovirus)	30 sek
EN 14348 (mykobactericidal)	1 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	2 min



KIILTO PRO MD DES ETANOL 75

Ytdesinfektion för synligt rena ytor
1 l (x12) • 693-12

Bruksfärdig etanolbaserad (75 vol%) desinfektion för synligt rena ytor. För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Även klassificerad som biocid, PT2, lämplig för allmänna ytor. Snabbverkande med bra effekt på virus. Lämnar inga rester på ytan.

*CE-märkt medicinteknisk produkt,
klass IIa (NB 0537)*

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	30 sek
EN 13624 (yeastocidal)	30 sek
EN 14476 (Adenovirus, Murin Norovirus)	30 sek
EN 14348 (mykobactericidal)	1 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	2 min

CE-märkta **desinfektionsservetter**



WIPECLEAN ETHANOL WITH SURFACTANT

Rengörande
desinfektionsservett
100 servetter (x12) • 5261

Färdigimpregnerad etanolbaserad (75 vol% desinfektionsservett med tensid. För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Dukstorlek: 20 x 20 cm, täcker 0,5 m². Även klassificerad som biocid, PT2, lämplig för allmänna ytor.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa (NB 2797)

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	1 min
EN 13624 (yeastocidal / fungicidal)	1 min / 2 min
EN 14476 (Adenovirus, Murin Norovirus) (rena förhållanden)	1 min
EN 14348 (mykobactericidal)	1 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	1 min
EN 13697 (bactericidal / yeastocidal)	1 min / 2 min



WIPECLEAN ALCO FREE

Rengörande
desinfektionsservett
small 25 (x20) servetter 5203
large 20 (x12) servetter 5204

Färdigimpregnerad QAC-baserad (DDAC + Triamine) desinfektionsservett med tensid. För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning som tål alkohol. Lämpligt för känsliga material. Large: 30 x 40 cm, täcker 2,5 m², Small: 20 x 30 cm, täcker 1 m². Även klassificerad som biocid PT2 & PT4, lämplig för allmänna ytor.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa (NB 2797)

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	1 min
EN 13624 (yeastocidal / fungicidal)	1 min / 2 min
EN 14476 (Adenovirus, Murin Norovirus)	1 min
EN 14348 (mykobactericidal)	1 min
EN 16615 (bactericidal / yeastocidal)	1 min
EN 13697 (bactericidal / yeastocidal)	1 min / 2 min



CLEANISEPT WIPES

Rengörande
desinfektionsservett
100 servetter (x12) • 8080

Färdigimpregnerad QAC-baserad servett för snabb och enkel desinficering och rengöring av alkoholkänslig medicinsk utrustning och ytor. För ytor på non-invasiv medicinteknisk utrustning eller instrument. Särskilt lämpad för ultraljudsprober som används för bukundersökningar. Dukstorlek: 14 x 20 cm, täcker 0,5 m². Även klassificerad som biocid, PT2, lämplig för allmänna ytor. Också för känsliga material så som olika plaster.

Godkänd för användning med ultraljudsprober från Siemens, Philips, Hitachi, SonoAce, Toshiba, SonoSite, Aloka, Saote & Shimadzu.

CE-märkt medicinteknisk produkt, klass IIa (NB 0123)

TESTSTANDARD	KONTAKTTID
EN 13727 (bactericidal)	1 min
EN 13624 (yeastocidal)	1 min
EN 14476 (alla höjebärande virus, rotavirus)	30 sek



ETT BÄTTRE VAL FÖR FRAMTIDEN OCH FÖR MILJÖN

Vilka är Kiilto?

Kiilto är en familjeägd koncern från Finland, med över en hundraårig historia och en vision om att vara miljöledande inom vår bransch. På Kiilto styrs vår verksamhet dagligen, i allt vi gör, av vårt löfte till miljön.

Läs mer om vårt löfte till miljön

